
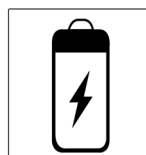


FAUTEUIL MISTRAL e

VHP à pousser

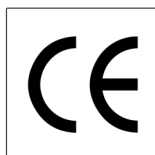

Le MISTRAL e, est un Dispositif Médical à usage intérieur exclusif. Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. L'assise, le dossier et le repose-jambes sont synchronisés.

Le MISTRAL e est un produit Français exclusif sur le marché, D.M. agréé par le CERAH.

caractéristiques :

| | |
|---------------------------|---|
| autonomie | inclinaison électrique à 30° : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés |
| + produit | repose-pieds rabattables pour un plus grand confort en position inclinée |
| assise | composée de mousse HR 35 (Haute Résilience) |
| sécurité | Normes non-feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible Normes non-feu revêtement Velours et Tissus chinés : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible |
| revêtements | velours déperlant, PVC/PU, tissus chinés |
| largeurs d'assise | 38, 44, 50, 56 & 65 cm |
| hauteur sol / assise | 48 cm |
| largeur hors tout | 66 cm (T4), 67 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16) |
| options disponibles | appareil de soutien partiel de la tête, cale-tronc ajustable, kit batterie, cale-tête fabrication spéciale, harnais, assise Classe II, tablette latérale |
| poids maximum utilisateur | 130 kg |
| poids du fauteuil | 38 kg |
| garanties | fauteuil 2 ans - vérin 5 ans |
| franco à l'unité | oui |
| fabrication | France - région grand Est- Aube |



FAUTEUIL MISTRAL e

dimensions en cm

| largeurs d'assise | profondeurs d'assise | largeurs hors-tout | hauteur d'assise | hauteur hors-tout | poids du fauteuil | poids maxi utilisateur |
|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 380 mm | 480 mm | 670 mm | 480 mm | 1320 mm | 38 kg | 130 kg |
| 440 mm | | 670 mm | | | | |
| 500 mm | | 730 mm | | | | |
| 560 mm | | 790 mm | | | | |
| 650 mm | | 880 mm | | | | |

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg

utilisation de la télécommande 2 boutons



Les deux boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.
Bouton BLANC : Avant
Bouton VERT : Arrière

aide à l'entretien

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, **vous devez l'entretenir régulièrement** de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

LES COLORIS



1

PVC / PU imperméable
 non-feu M2 
 1- cacao




2

velours déperlant non-feu
 EN 1021.1 & 1021.2 
 2 - choco édition



3

tissus chinés non-feu
 EN 1021.1 & 1021.2 
 3 - gris chiné

LES OPTIONS

câle-tête fabrication spéciale



appareil de soutien partiel de la tête



cale-tronc ajustable



harnais



assise Classe II



tablette latérale



kit batterie

